The background is a vibrant green with a soft, bokeh-like texture. It is decorated with several yellow flowers and green leaves. On the left side, there are three dandelion-like flowers on thin stems. On the right side, there are more yellow flowers and leaves, some appearing to be part of a larger plant or branch. The overall aesthetic is clean, fresh, and natural.

HRV軟體下載 及 安裝手冊

1. 請上心律健康網站

網址：www.healthmio.com



首頁

訊息快報

保健新知

商品介紹

常見問題

健康管理服務

登入



Vivify Health
轉譯生物訊號成為生命與生活的表現
讓健康活躍 生動起來



HRV健康安全帶
提供未來疾病風險預測，
掌握健康趨勢與確保生命的安全



健康壓力
提醒舒壓與休憩的
幫助達到壓力管理

2. 請點選首頁上方的「常見問題」



首頁

訊息快報

保健新知

商品介紹

常見問題

健康管理服務

登入

常見問題

首頁 > 常見問題

尋找問題:

尋找

公告主旨	發布日期	發布者	有效日期
何謂心律不整	3/13/2014	全球健管師	
為何心電檢測很重要?	3/13/2014	全球健管師	
健康Q&A	3/13/2014	全球健管師	
如何註冊成為新會員	3/19/2014	全球健管師	
HRV是什麼?	5/16/2014	布萊恩	
我們常覺得自己還算健康，沒甚問題，健康可以靠感覺嗎？	3/13/2014	布萊恩	3/30/2014
要如何及早發現身體的生病危機呢？去醫院作健康檢查不就好了嗎？	3/13/2014	布萊恩	12/30/2014
如何加入管理員？	3/19/2014	布萊恩	12/30/2014
HRV心律測量儀應用程式下載	3/18/2014	布萊恩	12/31/2014

關於我們 藉由健康照顧與幫助
使人們獲得健康

學習風格

3. 請點選「HRV心律測儀應用程式下載」

首頁 訊息快報 保健新知 商品介紹 常見問題 健康管理服務

登入 常見問題 首頁 > 常見問題

尋找問題: 尋找

公告主旨	發布日期	發布者	有效日期
何謂心律不整	3/13/2014	全球健管師	
為何心電檢測很重要？	3/13/2014	全球健管師	
健康Q&A	3/13/2014	全球健管師	
如何註冊成為新會員	3/19/2014	全球健管師	
HRV是什麼？	5/16/2014	布萊恩	
我們常覺得自己還算健康，沒甚問題，健康可以靠感覺嗎？	3/13/2014	布萊恩	3/30/2014
要如何及早發現身體的生病危機呢？去醫院作健康檢查不就好了嗎？	3/13/2014	布萊恩	12/30/2014
如何加入管理員？	3/19/2014	布萊恩	12/30/2014
HRV心律測量儀應用程式下載	3/18/2014	布萊恩	12/31/2014

4. 請點選圖示下載HRV應用程式



心律健康中心

以生物訊號分析與生物回饋效應為
獨特專業技術

首 頁 訊息快報 保健新知 商品介紹 常見問題 健康管理服務

您尚未登入網路健康管理會員

登入
LOGIN

會員專區

關於我們 藉由健康照顧與幫助
使人們獲得健康

學習風格

健康關懷 HRV紀錄 血壓紀錄 血糖紀錄 BMI紀錄 健康問卷 健檢報告 健康諮詢 帳號管理

閱讀公告內容: [上一頁](#)

類別	常見問題
主旨	HRV心律測量儀應用程式下載
發布日期	3/18/2014
內容	請按圖示下載 HRV 應用程式(WinXP/Win7) (或按右鍵另存新檔,解壓後請先裝 PL2303(USB連接驅動程式) 後, 接著安裝 HRV 應用軟體 CheckMyHeart)
發布者	布萊恩



5. 點選下載後，請選擇儲存－另存新檔



內容



請按圖示下載**HRV**應用程式(WinXP/Win7)

(或按右鍵另存新檔,解壓後請先裝**PL2303(USB連接驅動程式)**後,

接著安裝**HRV**應用軟體**CheckMyHeart**)

發布者

布萊恩

有效日期

12/31/2014

消息來源

<http://www.healthmio.com>

上一頁

您要開啟或儲存來自 healthmio.com 的 HRVDriver.zip (7.31 MB)?

開啟(O)

儲存(S)


儲存(S)

另存新檔(A)

儲存並開啟(O)



6. 選擇要儲存的位置

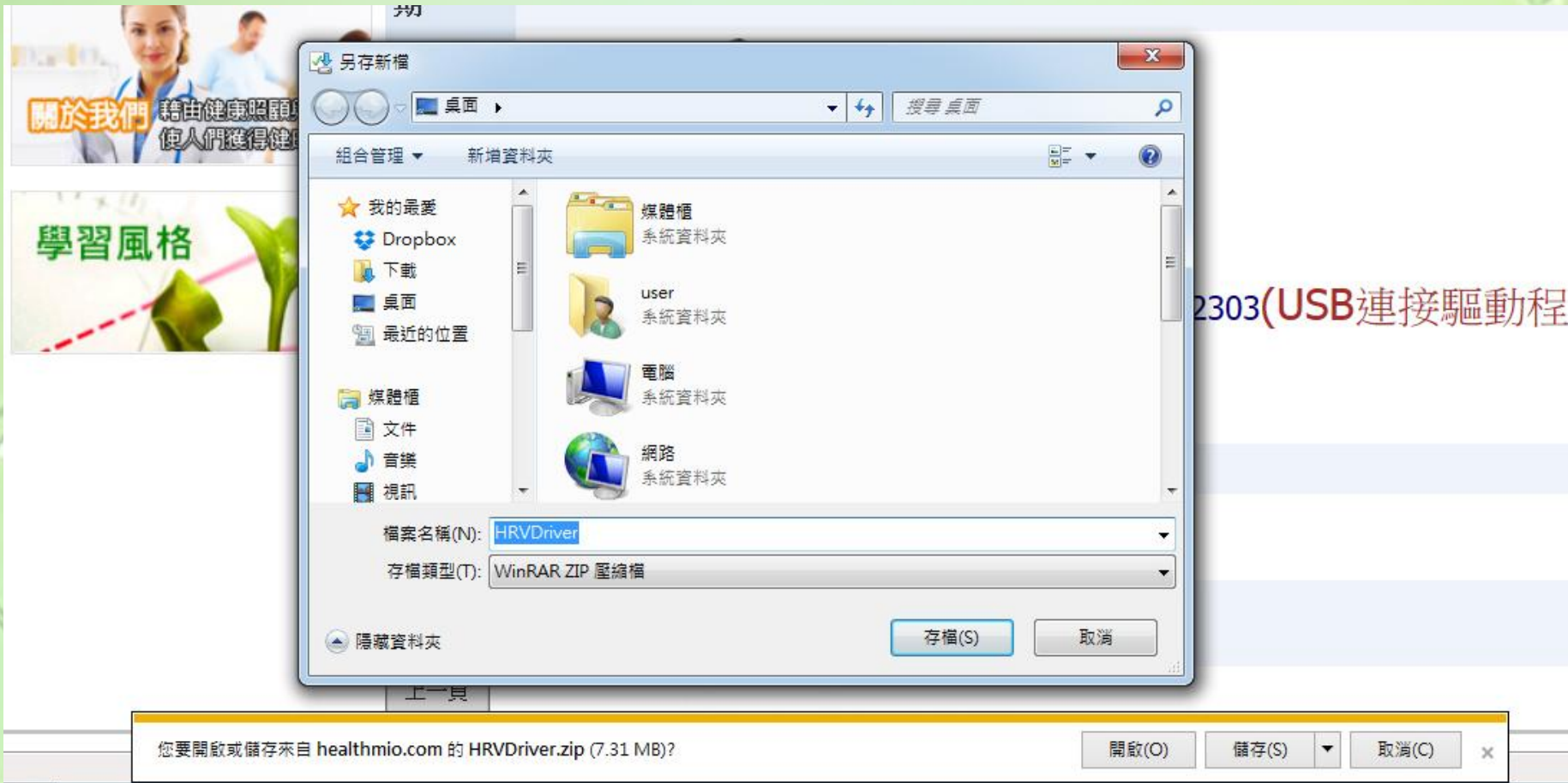

7. 儲存成功，會出現下載完成的對話框



內容

按這裡

請按圖示下載**HRV**應用程式(WinXP/Win7)

(或按右鍵另存新檔,解壓後請先裝**PL2303(USB連接驅動程式)**後,

接著安裝**HRV**應用軟體**CheckMyHeart**)

發布者

布萊恩

有效日期

12/31/2014

消息來源

<http://www.healthmio.com>

上一頁

HRVDriver.zip 下載已完成。


開啟(O)

開啟資料夾(P)

檢視下載(V)

×

8. 請打開下載的 HRVDriver 程式壓縮檔

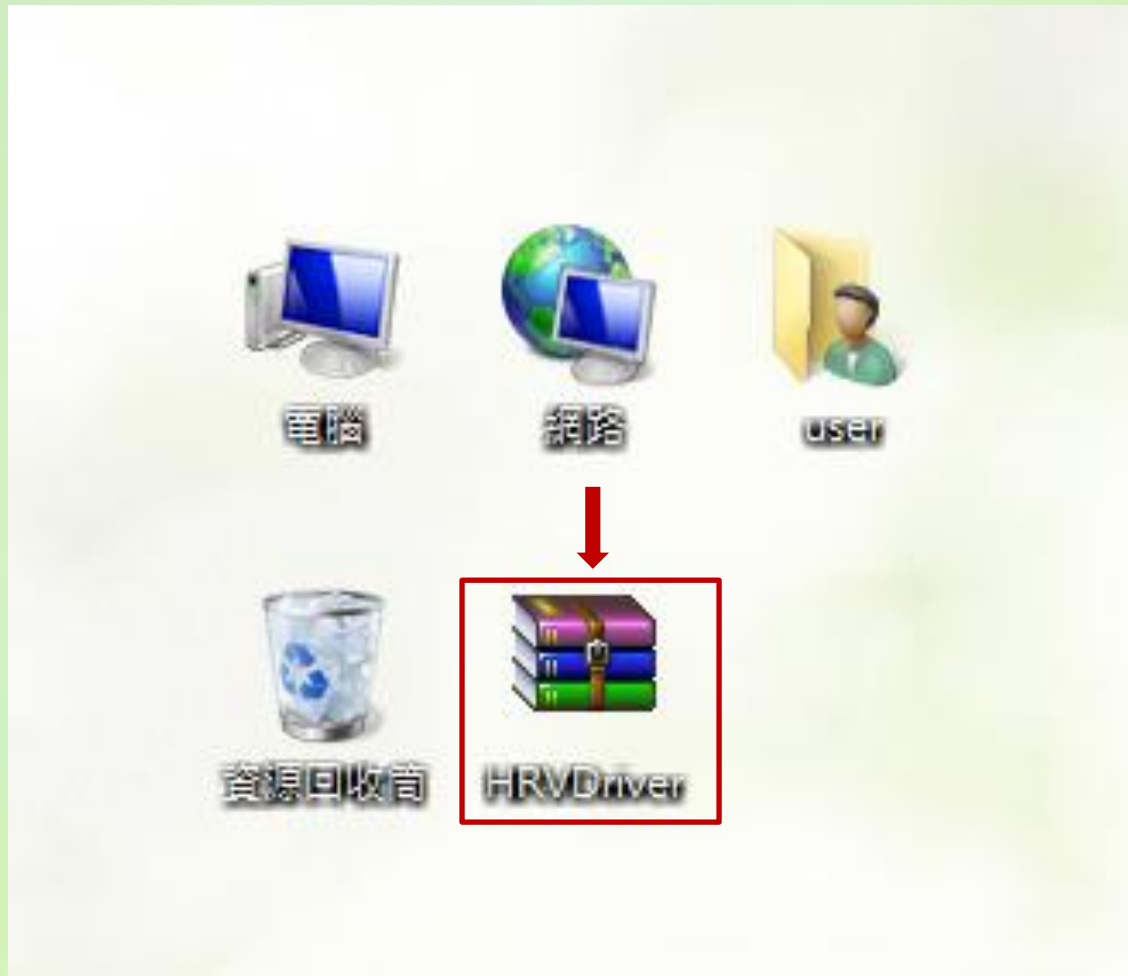

9. 請解壓縮至桌面

1

HRVDriver.zip - WinRAR

檔案(F) 指令(C) 工具(S) 我的最愛(O) 選項(N) 說明(H)

加入 解壓縮到 測試 檢視 刪除 尋找 精靈 資訊 防毒 註解 自解

HRVDriver.zip - ZIP 壓縮檔, 未封裝大小 8,531,848 位元組

名稱	大小	封裝後	類型
..			檔案資料夾
CheckMyHeart ...	5,355,544	5,317,131	應用程式
PL2303.exe	3,176,304	2,353,777	應用程式

2

修改的

解壓縮路徑及選項

一般設定 進階設定

目的地路徑(如果不存在就自動建立)(P)
C:\Users\user\Desktop\HRVDriver

更新模式

- 解壓縮並取代檔案(R)
- 解壓縮並更新檔案(U)
- 僅更新已經存在的檔案(F)

覆寫模式

- 覆寫前先詢問(K)
- 不用確認就覆寫(W)
- 略過已經存在的檔案(S)
- 自動重新命名(M)

雜項

- 解壓縮檔案至子資料夾(L)
- 保留毀損的檔案(B)
- 在檔案總管顯示檔案(X)

顯示(D) 新資料夾(E)

儲存設定(V)

確定 取消 說明


總共 8,531,848 位元組, 共計 2 個檔案

10. 解完壓縮檔，會出現2個程式

1




2

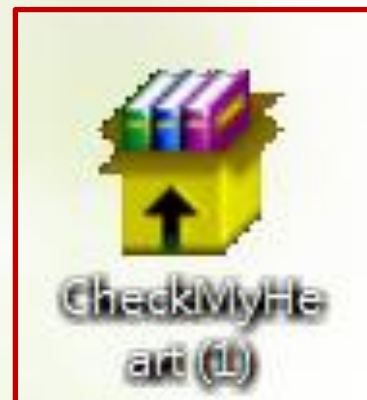


11. 請先點選PL2303安裝


1

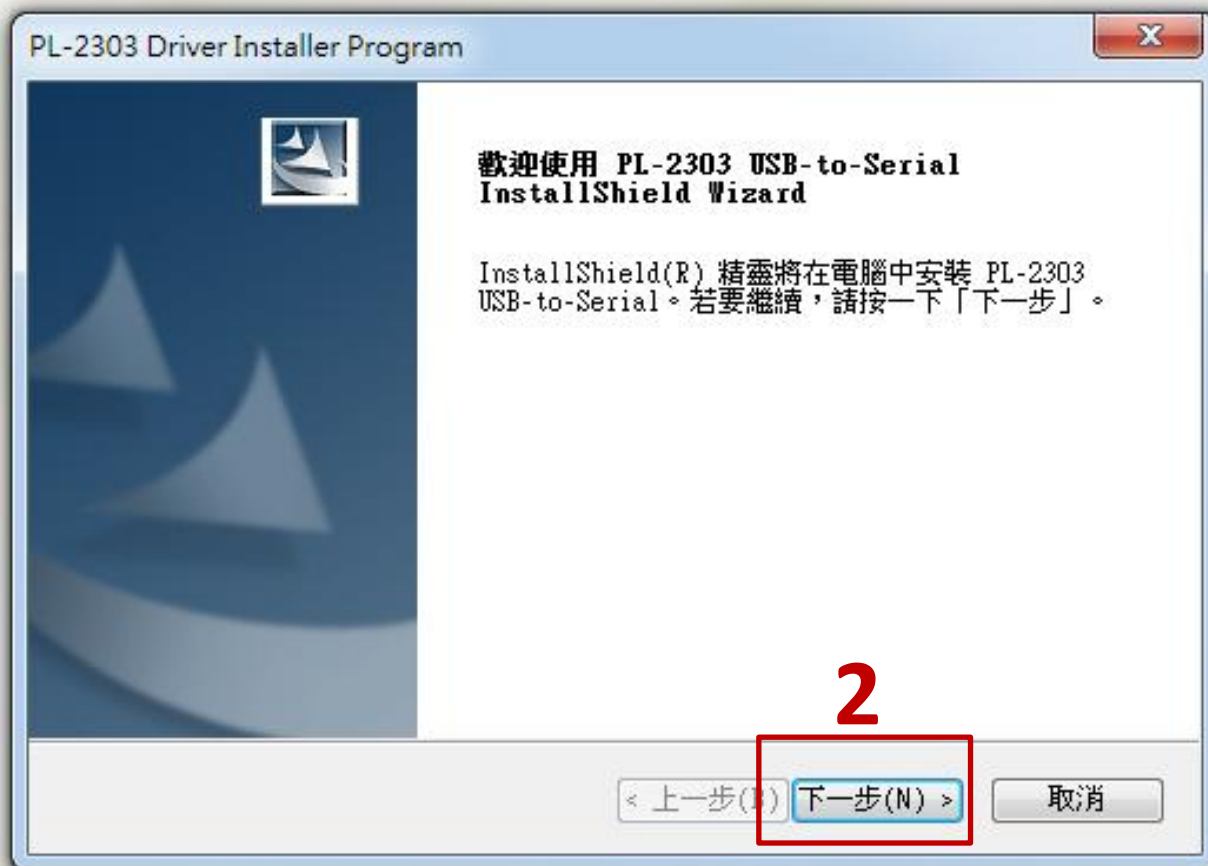


12. 請等待程式自動安裝

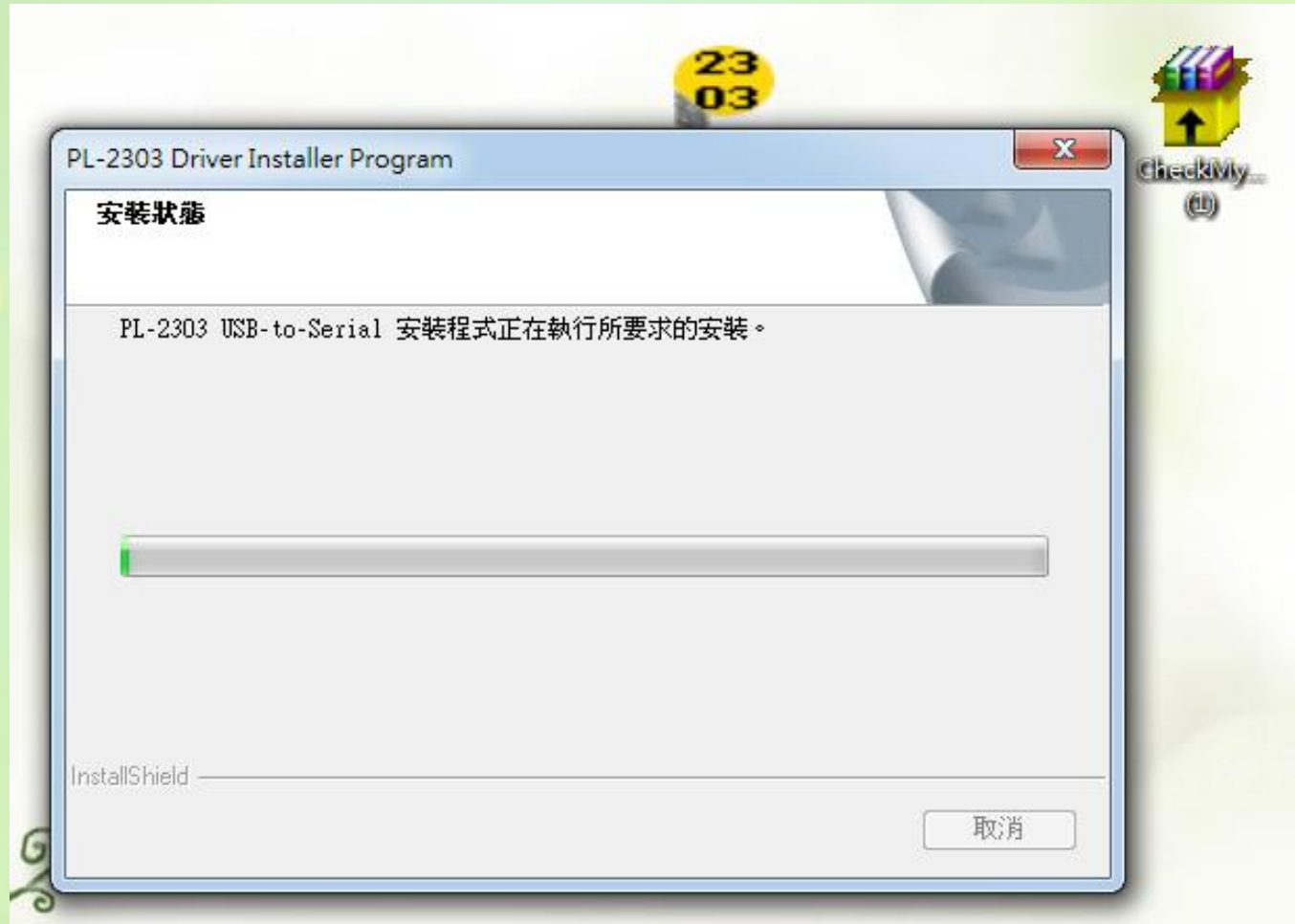

13. 出現安裝完成的對話框

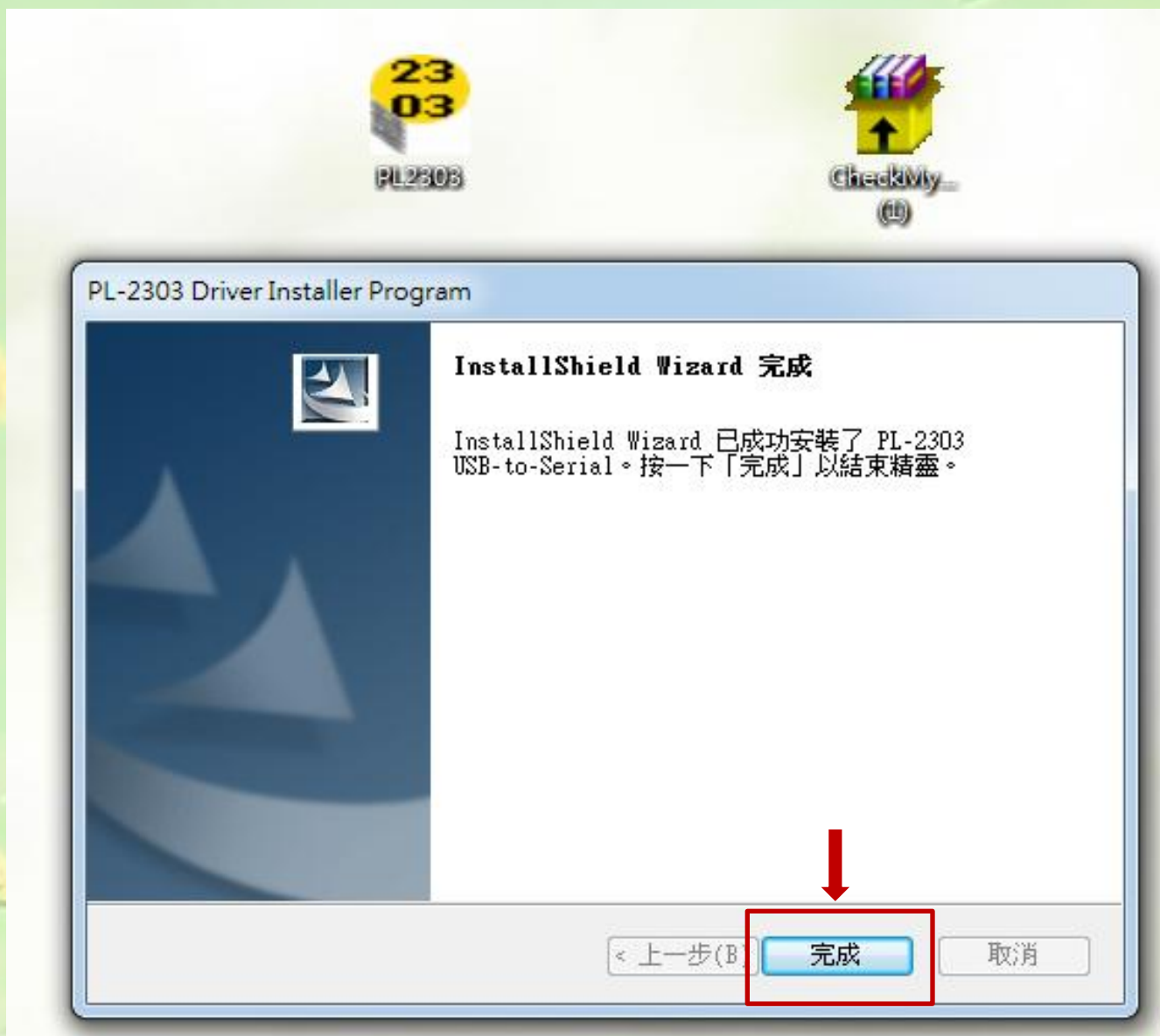

14. 請點選另1個Check Myheat程式， 進行安裝

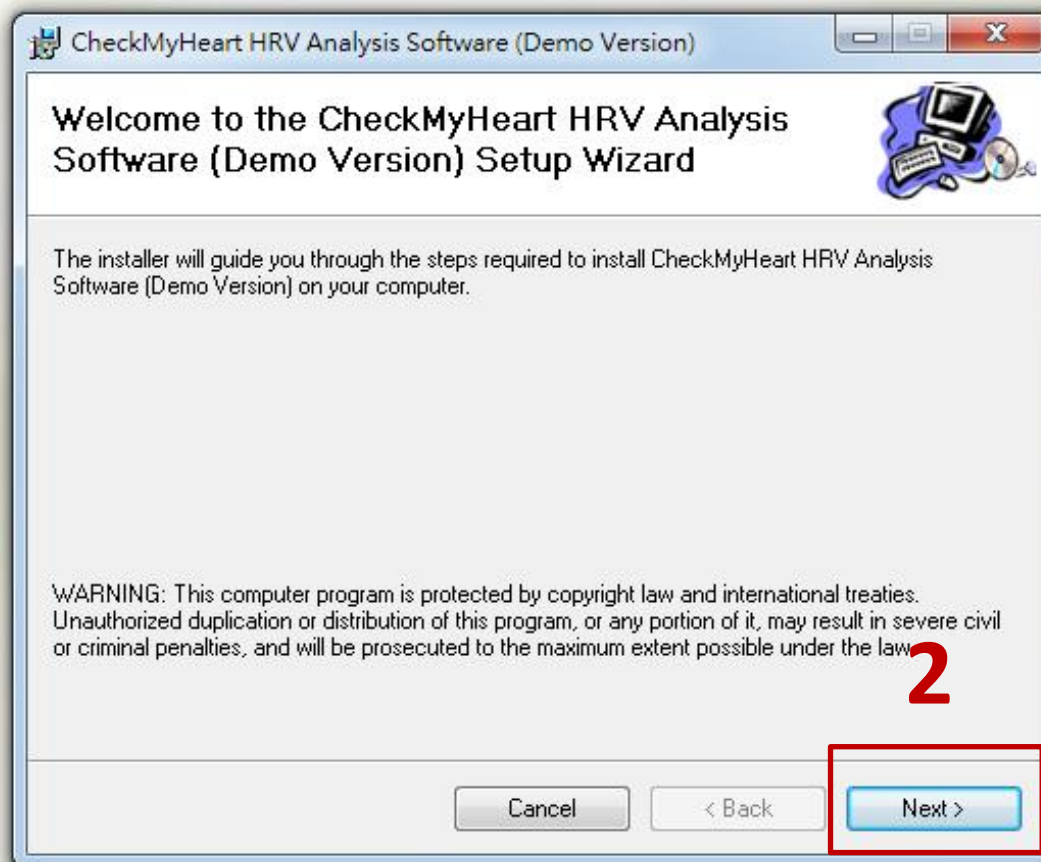


1




2

15. 等待自動安裝程式

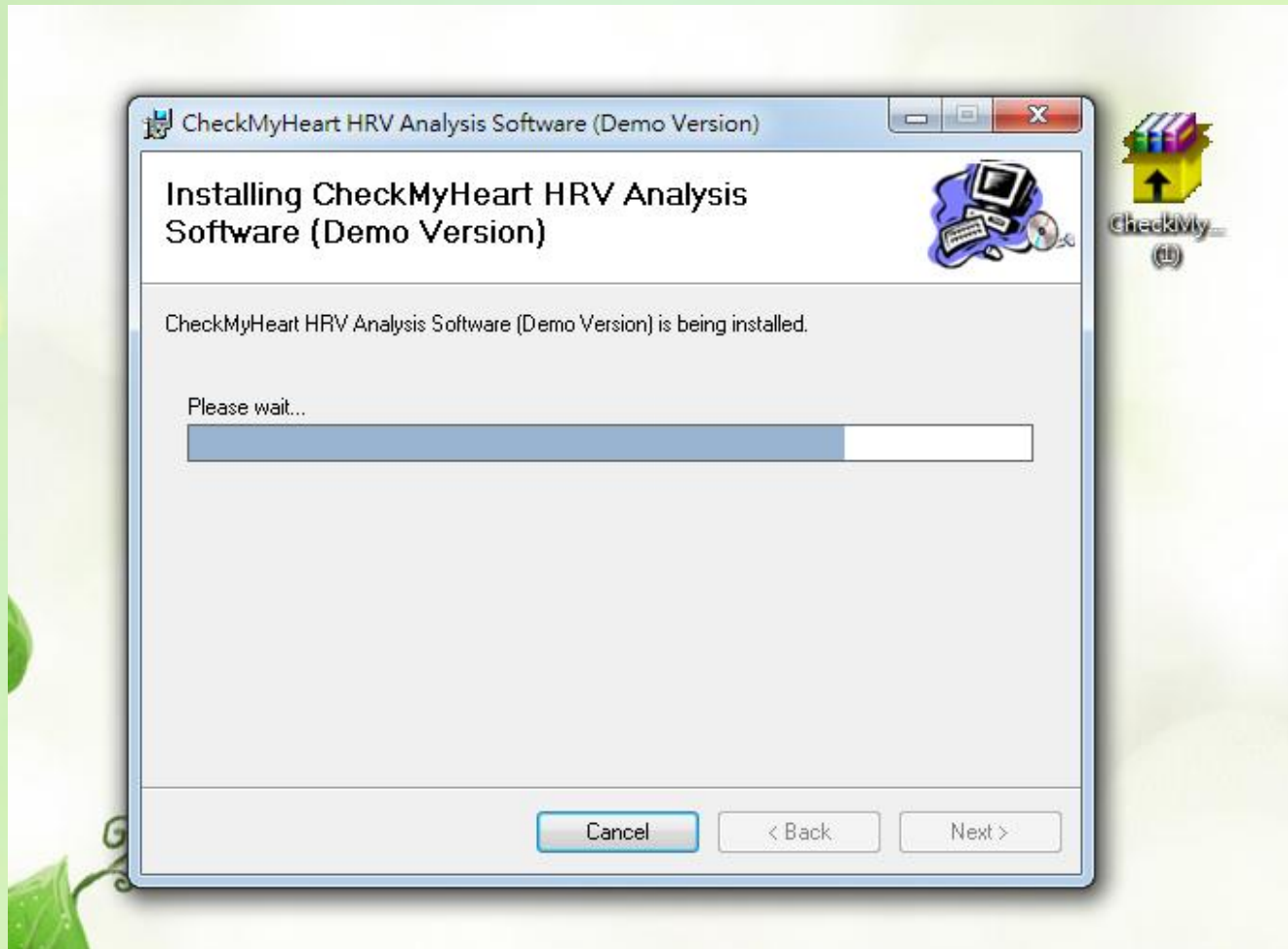

16. 出現安裝完成的對話框

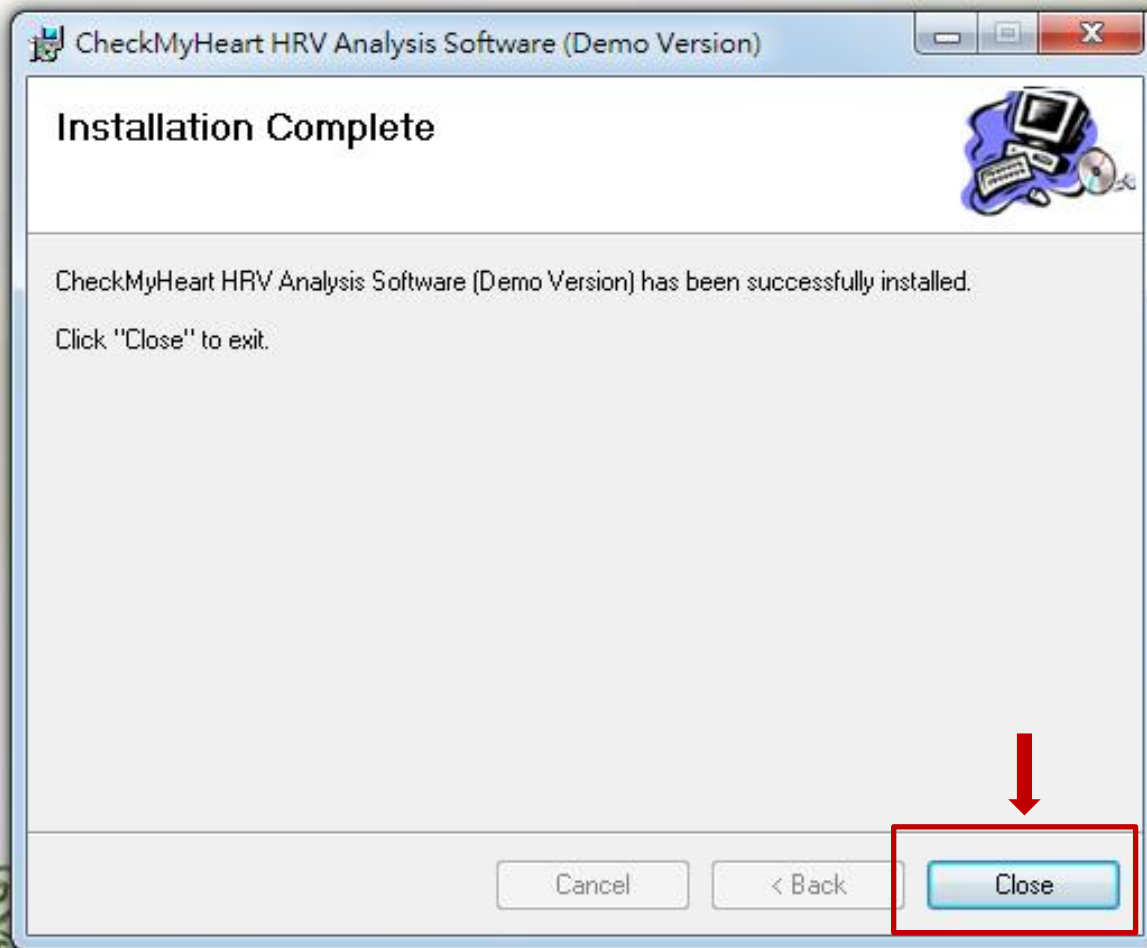

17. 成功安裝HRV的軟體，會在桌面出現CheckMyheat的捷徑



18. 打開CheckMyheat軟體




CheckMy
(Demo Ve...




CheckMyHeart Handheld HRV

Version - R30 V2.00 0000 / 000 00


19. 此為成功安裝、開啓 CheckMyheat軟體的畫面

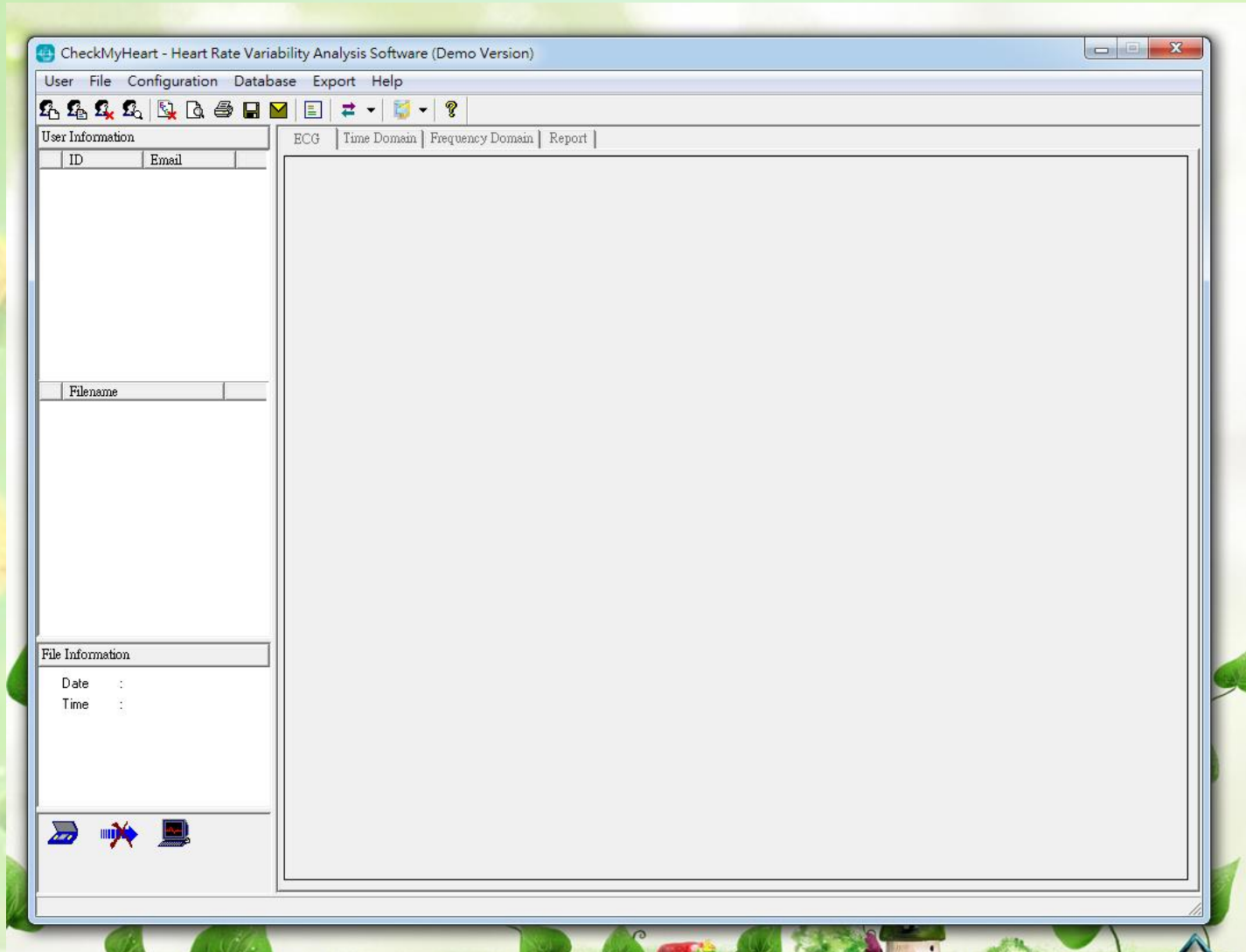

20. 建立新的使用者

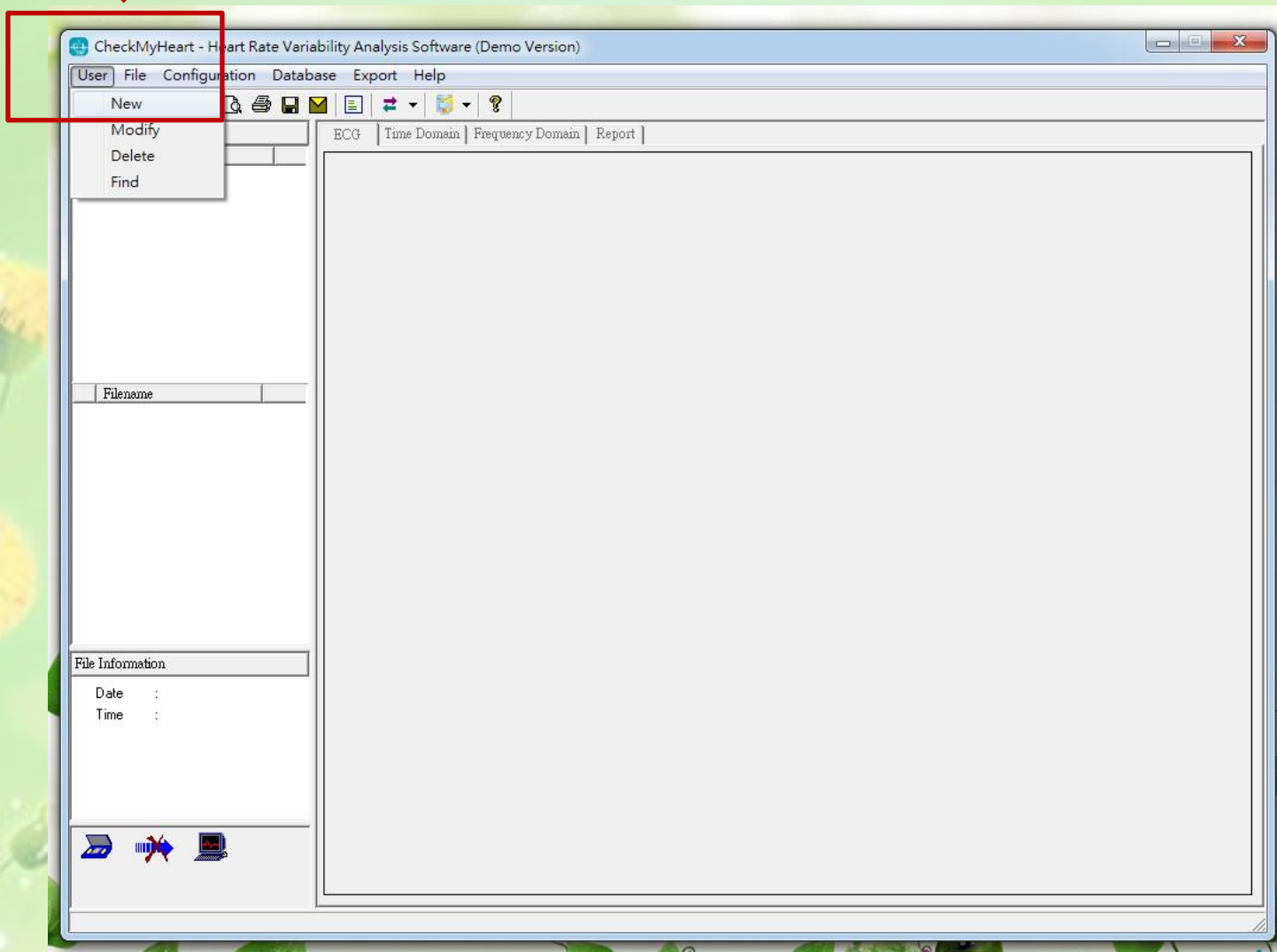

21. 輸入要建立新使用者的資料

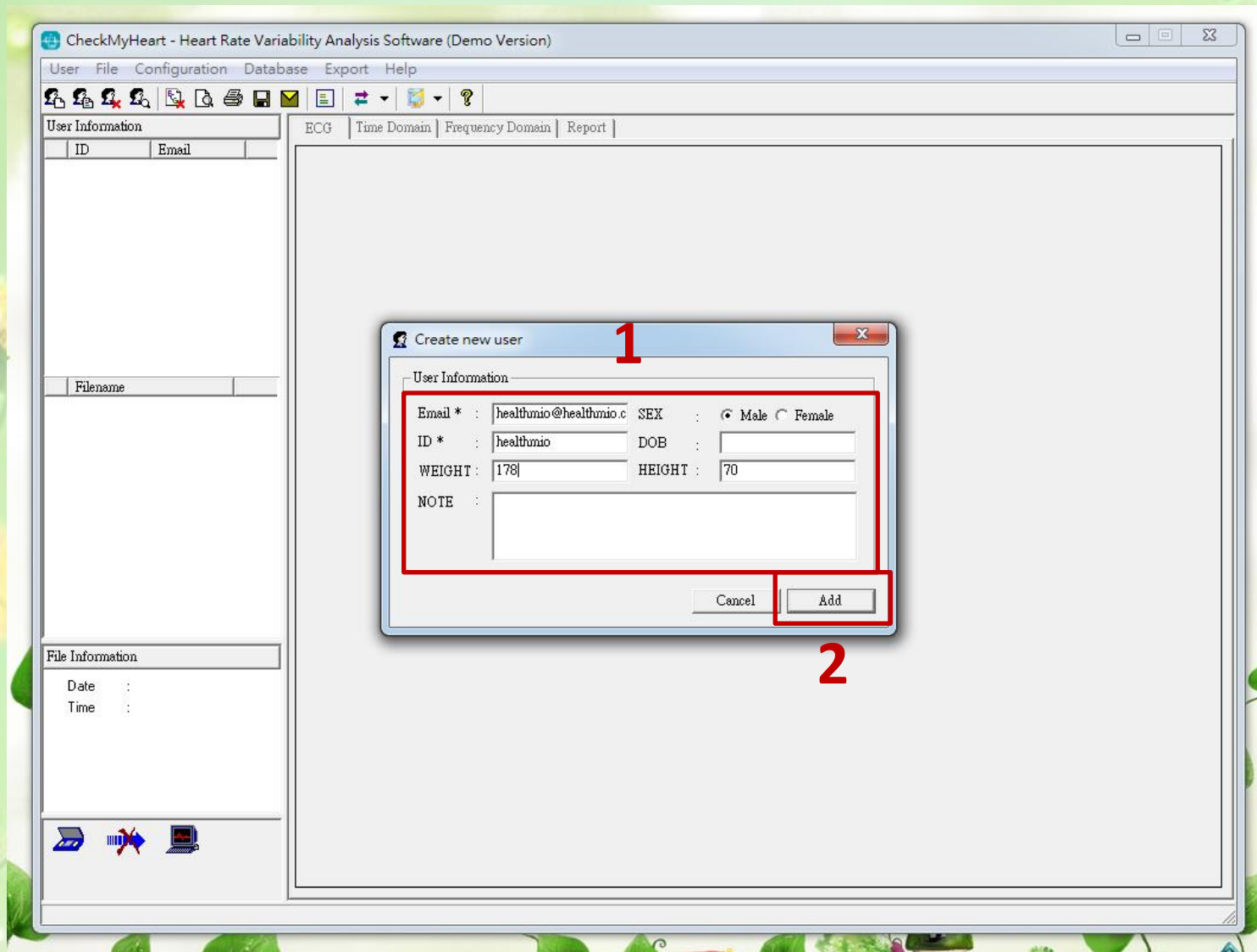

22. 成功建立新的使用者

